

# NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test na detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nazálních, nazofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Test určen pro profesionální použití

Katalogové číslo: 243103N-25N-PA

Zatímco rychlý test **na protilátky** NADAL<sup>®</sup> COVID-19 IgG / IgM \* detekuje virus nepřímo, **NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Antigen Rapid Test** detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti konkrétního proteinu viru SARS-CoV-2.

Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci virů, protože je velmi hojný ve virech a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.


**NADAL<sup>®</sup> COVID-19 Antigen Rapid Test** je rychlý imunotest s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nazálních, nazofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Tento test slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARS-CoV-2. Vezměte na vědomí, že **koncentrace antigenu virového nukleoproteinu se mohou v průběhu onemocnění lišit a mohou spadnout pod detekční limit testu. Možnou infekčnost na základě negativních výsledků testů tedy nelze vyloučit.**

Jednoduchý postup, výsledek do 15 minut.

## Jasně výhody


- V Vysoká specifita
- V Vysoká citlivost při vysoké virové zátěži
- V Snadné použití
- V Rychlé a spolehlivé výsledky testů za pouhých 15 minut
- V Testování lze provést s nazálními, ale také nazo- a orofaryngeálními vzorky
- V Lze skladovat při pokojové teplotě
- V Souprava obsahuje všechny potřebné komponenty
- V Žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo s viry chřipky (jako chřipka A / B)

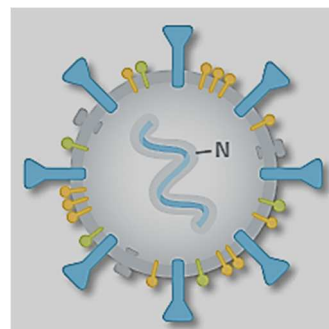

Podrobnější informace naleznete v návodu.



Identifikace pacientů s vysokou virovou zátěží -  
podobná citlivost na PCR při hodnotách  $C_t \leq 30$

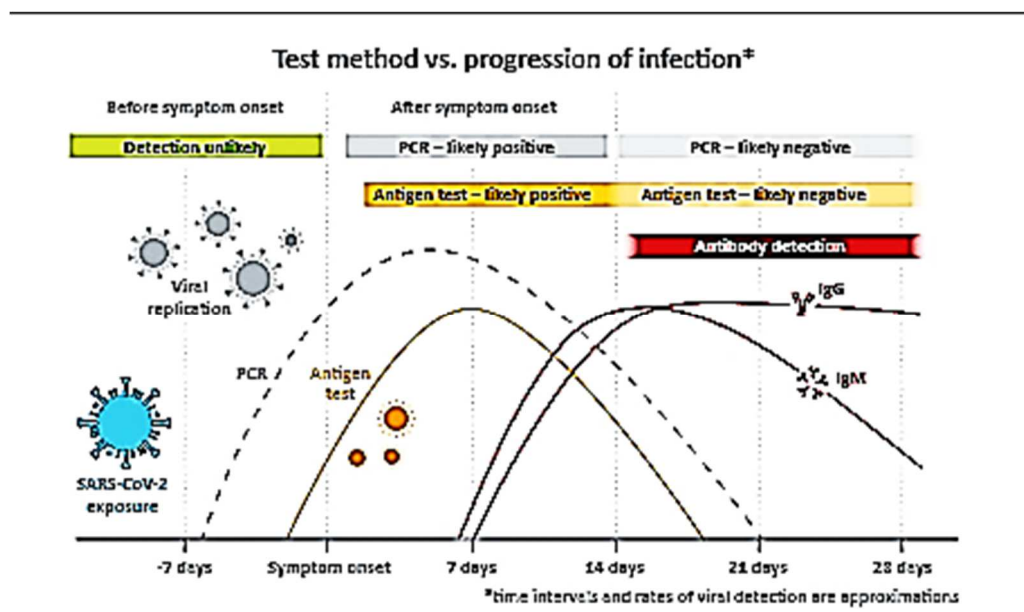

## NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test pro detekci SARS-CoV-2 antigenů virových nukleoproteinů v lidských nazálních, nazofaryngeálních a orofaryngeálních střezech.

Produkt	Certifikace	Vzorek	Senzitivita	Specifická	Katalogové číslo	Balení
NADAL® COVID-19 Ag Testovací kazeta	CE	Nazo- a orofaryngeální Výtěr Nazální – krátký stěr	97,56 % ( $C_t$ rozpětí 20-30)  90,2 % Celková shoda 97,2 %	> 99,9 %	243103N-25PA	25 testů v balení

Dodávaný materiál: testovací kazety, sterilní odběrové tampony, extrakční zkumavky vč. víčka s kapátkem, držák činidla, jednotlivé lahvičky s pufrem, stojánek na zkumavky a příbalový leták v ČJ.

**Balení po 25 jednotlivě balených testech**

**Aktuální cena na vyžádání**



Objednávky ČR:  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [p Praha@jktrading.cz](mailto:p Praha@jktrading.cz)

Objednávky SK:  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888,0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

Více informací:  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žurová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)