
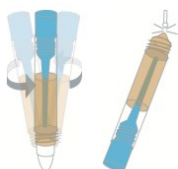


NADAL® FOB 75 test



Obj.č. 272942N-20

NADAL® FOB75 test je vizuální, imunochromatografický rychlý test ke kvalitativnímu presumpčnímu průkazu lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Test slouží jako pomoc při stanovení diagnózy patologických stavů dolní části gastrointestinálního traktu. Test je určen pouze pro profesionální použití. Před testováním nejsou nutná žádná dietní omezení.

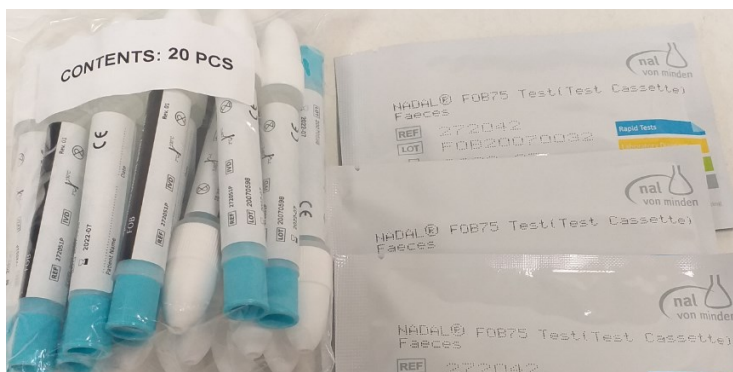

Každý testovací kit je určen pro 20 testování a obsahuje

- 20 jednotlivě balených testovacích kazet
- 20 zkumavek s ředícím pufrem pro odběr vzorku
- 1 návod k použití

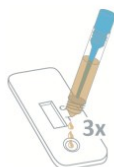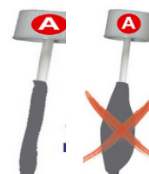

Vzorek, který obsahuje lidský hemoglobin s koncentrací rovnou nebo vyšší než **75 ng/ml**, dává **pozitivní výsledek**. Výsledek se odečítá po **5 minutách vizuálně**.

NADAL® FOB75 test má pracovní rozsah od 3,75 µg/g do 250 µg/g stolice (= 75 ng/ml až 5000 ng/ml).



Diagnostická senzitivita: 86,3%

Diagnostická specifita: 93,8%



K soupravě lze zakoupit odběrový papír na stolici

Kat.č. 50004, Balení 20 ks

Ceny na vyžádání



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
 Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5-Zličín
 tel.: 257 220 760
 email: praha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
 Dlhá 1264/43,
 900 31 Stupava
 tel.: 0907 670 888, 0264 776 790
 email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
 Ing. Kryl 777 929 604
 Ing. Žúrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk