

TECHNICKÝ LIST

SMSH (60 g/sq.m)

KÓD VÝROBKU	:	SMSH
PODLE STANDARDŮ	:	Balící archy SMSH značky PMSSteripack jsou vyráběny v souladu s normou ISO 11607-1. Balící archy SMSH splňují požadavky směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.
ÚČEL POUŽITÍ	:	Správné balení je velmi důležitým krokem pro zajištění sterility sterilizovaného obalu. Vhodné techniky balení a správné použití obalového materiálu zajišťují sterilní bariéru během procesu sterilizace i po něm. PMSSteripack SMSH se používají k balení materiálů určených ke sterilizaci, jako jsou zásobníky, chirurgické soupravy. SMSH jsou upřednostňovány místo tkaniny kvůli menším pórovým strukturám.
PROVOZNÍ PODMÍNKY	:	PMSSteripack SMSH jsou určeny pro použití při sterilizaci parou, ethylenoxidem, formaldehydem a VH ₂ O ₂ . SMSH se snadno přizpůsobí různým tvarům a velikostem sít, což umožňuje vynikající průchodnost různé metody sterilizace

SPECIFIKACE VÝROBKU

VLASTNOST	METODA	JEDN.	HODNOTA	
HMOTNOST	WSP 130.1 (05)	g/m ²	60	
TLOUŠŤKA	WSP 120.6 (05)	mm	390	
SÍLA V TAHU	WSP 110.4 (05)	N/5 cm	MD	140
			CD	68
PRODLOUŽENÍ A PROTRŽENÍ	WSP 110.4 (05)	%	MD	132
			CD	129
VODĚODLNOST	WSP 80.6 (05)	mm	600	



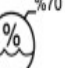








BALENÍ :

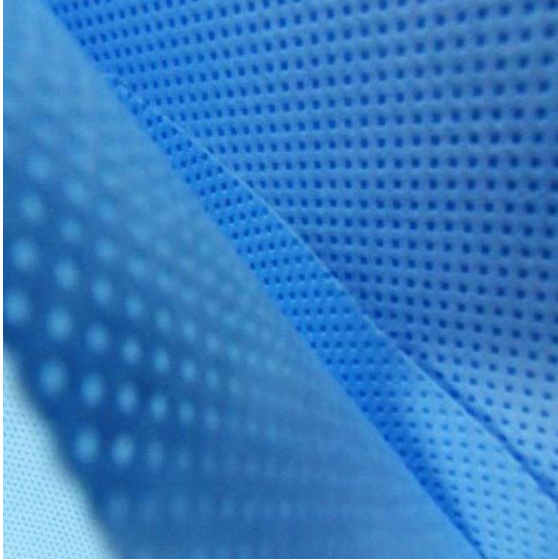
<u>Kód výrobku</u>	<u>Dílčí balení</u>	<u>Ks/bal</u>
SMSH 3030	200	800
SMSH 4040	200	600
SMSH 4545	200	400
SMSH 5050	200	400
SMSH 6060	100	200
SMSH 7575	125	125
SMSH 9090	100	100
SMSH 100100	100	100
SMSH 120120	50	50
SMSH 130150	50	50
SMSH 150150	50	50



PMSSteripack®

ŠTÍTEK :

PMS Steripack	DESCRIPTION TANIM BESCHREIBUNG DEFINITION HEPITPAQH تصویر	CODE KOD CODE CODE ΚΩΔΙΚΟΣ كود	    
	SIZE EBAT GRÖÖE MESURE MEFEOÖZ العمد	QUANTITY MIKTAR MENGE QUANTITE HOÖÖTHTA الكمية	
	 		
	PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş. Kardıracı Mh. Barışak Bölge 11. Cadde No: 46 Adana No: 3197520954, Adana 22020 Merkez / Türkiye T: +90 324 228 7042 F: +90 324 228 6540 www.pmsmedikal.com pms@pmsmedikal.com MADE IN TURKEY	 EN 868-5	

**PMS****PMSSteripack®**

PMS Tıbbi Cihazlar Teknolojisi San. ve Tic A.Ş
pms@pmsmedikal.com