
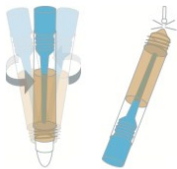




## NADAL® FOB 75 test Obj.č. 272942N-20

**NADAL® FOB75 test** je vizuální, imunochromatografický rychlý test ke kvalitativnímu presumpčnímu průkazu lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Test slouží jako pomoc při stanovení diagnózy patologických stavů dolní části gastrointestinálního traktu. Test je určen pouze pro profesionální použití. Před testováním nejsou nutná žádná dietní omezení.

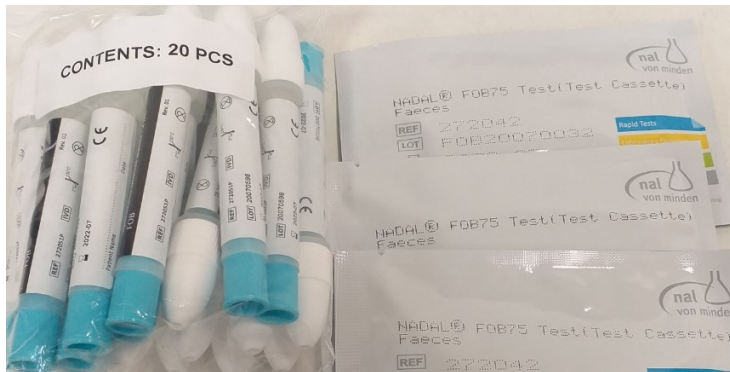

**Každý testovací kit je určen pro 20 testování a obsahuje**

- 20 jednotlivě balených testovacích kazet
- 20 zkumavek s ředícím pufrem pro odběr vzorku
- 1 návod k použití

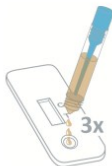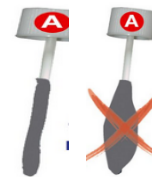

Vzorek, který obsahuje lidský hemoglobin s koncentrací rovnou nebo vyšší než **75 ng/ml**, dává **pozitivní výsledek**. Výsledek se odečítá **po 5 minutách vizuálně**.

**NADAL® FOB75 test** má pracovní rozsah od 3,75 µg/g do 250 µg/g stolice (= 75 ng/ml až 5000 ng/ml).



Diagnostická senzitivita: 86,3%  
Diagnostická specifická: 93,8%



K soupravě lze zakoupit odběrový papír na stolici  
**Kat.č. 50003, Balení 20 ks**

### Ceny na vyžádání



**Objednávky ČR:**  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

**Objednávky SK:**  
**JK-Trading s.r.o.**,  
Dlhá 1264/43,  
900 31 Stupava  
tel.: 0907 670 888, 0264 776 790  
email: [jk-trading@jk-trading.sk](mailto:jk-trading@jk-trading.sk)

**Více informací:**  
Ing. Kryl 777 929 604  
Ing. Žúrová: 777 929 623  
[www.jktrading.cz](http://www.jktrading.cz)  
[www.jk-trading.sk](http://www.jk-trading.sk)