




NADAL[®] PROM Amniotic Fluid Test

Katalogové číslo: 431006N-03 / 431006N-10 / 431006N-20

Rychlý kvalitativní protilátkový test na detekci plodové vody (IGFBP-1) ve vaginálním sekretu.

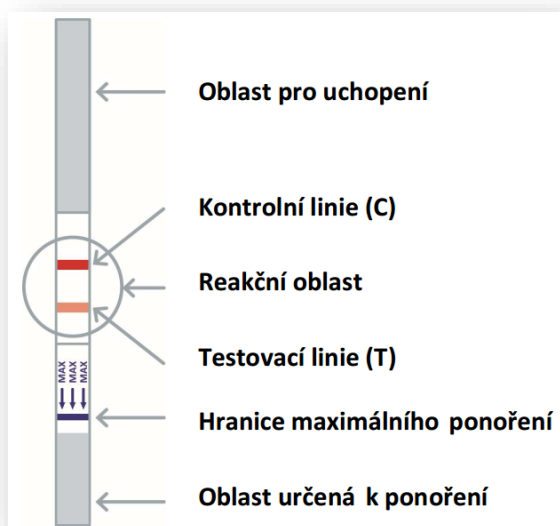

Vysoce citlivá a specifická diagnostika pomocí proužku PROM (Premature Rupture of Fetal Membranes). Jde o proužkový imunochromatický kvalitativní test k detekci plodové vody ve vaginální sekreci. Přítomnost plodové vody se určuje detekcí inzulínu podobného růstového faktoru 1, (insulin-like growth factor binding protein-1) IGFBP-1, jehož koncentrace v plodové vodě je 100–1000× vyšší než v séru matky. Za normálních okolností IGFBP-1 není ve vagíně přítomen, ale po ruptuře plodových obalů se plodová voda s vysokou koncentrací IGFBP-1 mísí s vaginální sekrecí.

Charakteristiky testu

Analytická senzitivita: 5 ng/mL IGFBP-1

Senzitivita: 97,6 %

Specifita: 97,8 %

Odečet výsledku: po 5 minutách

Obsah soupravy

- jednotlivě balené testovací proužky
- sterilní výtěrové tampóny
- zkumavky na vzorek s extrakčním pufrům
- stojan na zkumavky



Obj. č.*	Počet ks v balení
431006N-03	3
431006N-10	10
431006N-20	20

Pozn*: Číslo za pomlčkou označuje počet testů v balení.



Objednávky ČR:
JK-Trading s.r.o.,
Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: paha@jktrading.cz

Objednávky SK:
JK-Trading s.r.o.,
Dlhá 1264/43,
900 31 Stupava
tel.: 0907 670 888,0264 776 790
email: jk-trading@jk-trading.sk

Více informací:
Ing. Kryl 777 929 604
Ing. Žůrová: 777 929 623
www.jktrading.cz
www.jk-trading.sk

Platnost od 1.1.2023