



NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test na detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů.

Důležitost rychlého testu antigenu COVID-19 :

"Každá kategorie diagnostických testů má svoji vlastní jedinečnou roli v "boji proti tomuto viru. "

- US Food and Drug Administration


Zatímco rychlý test NADAL® COVID-19 IgG / IgM * detekuje virus nepřímou, **NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test** detekuje virus přímo zjištěním přítomnosti konkrétního proteinu viru SARS-CoV-2.

Detekce antigenu vyplňuje mezeru v doposud nabízené diagnostice . Nukleokapsidový protein (N) je ideální pro detekci virů, protože je velmi hojný ve virech a dostatečně specifický pro SARS-CoV-2. Je to jeden ze 4 nejdůležitějších strukturálních proteinů a podílí se na replikaci, transkripci a obalení virového genomu.

NADAL® COVID-19 Antigen Rapid Test je rychlý imunotest s laterálním tokem pro kvalitativní detekci virových nukleoproteinových antigenů SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních stěrů. Tento test slouží jako pomůcka při diagnostice infekcí SARS-CoV-2. Vezměte na vědomí, že koncentrace antigenu virového nukleoproteinu se mohou v průběhu onemocnění lišit a mohou spadnout pod detekční limit testu. Možnou infekčnost na základě negativních výsledků testů tedy nelze vyloučit.


Jasně výhody

- V Vysoká specifická
- V Vysoká citlivost k vysoké virové zátěži
- V Snadné použití
- V Rychlé a spolehlivé výsledky testů za pouhých 15 minut
- V Testování lze provést s nasofaryngeálními vzorky
- V Lze skladovat při pokojové teplotě
- V Všechny komponenty testu - včetně sterilních tamponů jsou součástí soupravy
- V Žádná zkřížená reaktivita s lidskými patogenními koronaviry (jako hCoV-229E, -HKU1, -NL63 a -OC43) nebo s viry chřipky (jako chřipka A / B)

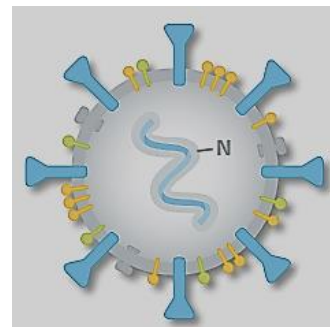

Postup testu


Interpretace výsledků

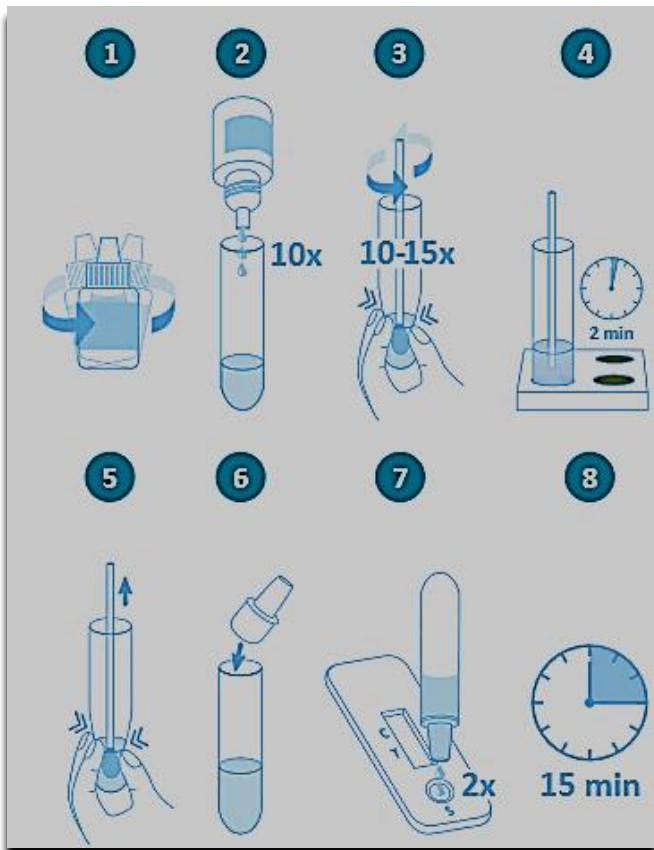


Detailnější informace naleznete v návodu.

Odstranění mezery v diagnostice - podobné detekční okno jako PCR.

Source: Sethuraman N, Jeremfah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-2251

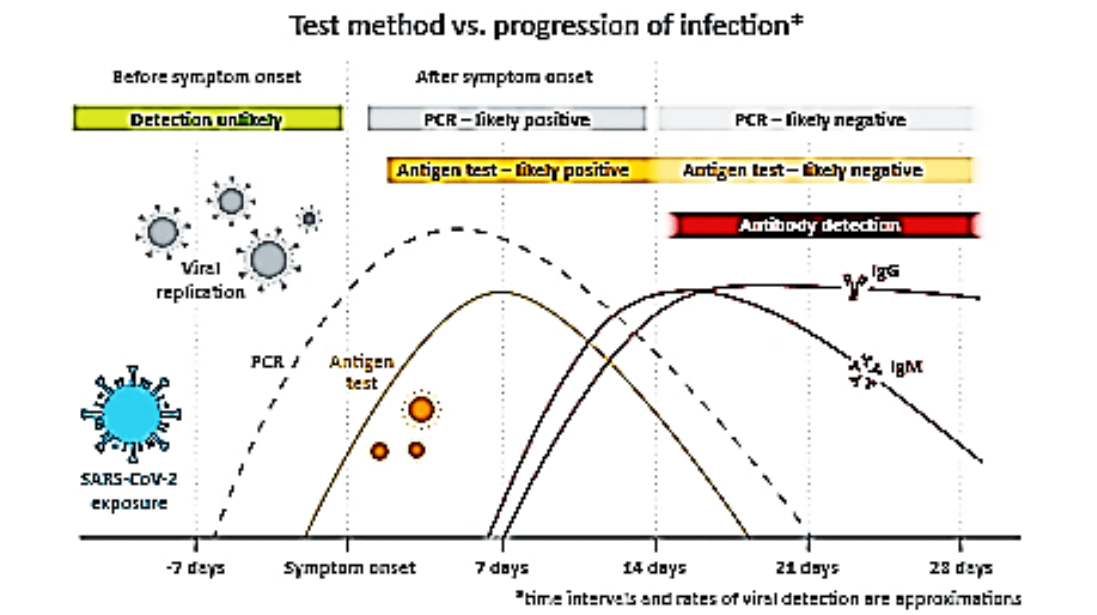

Identifikace pacientů s vysokou virovou zátěží -
podobná citlivost na PCR při hodnotách $C_t \leq 30$

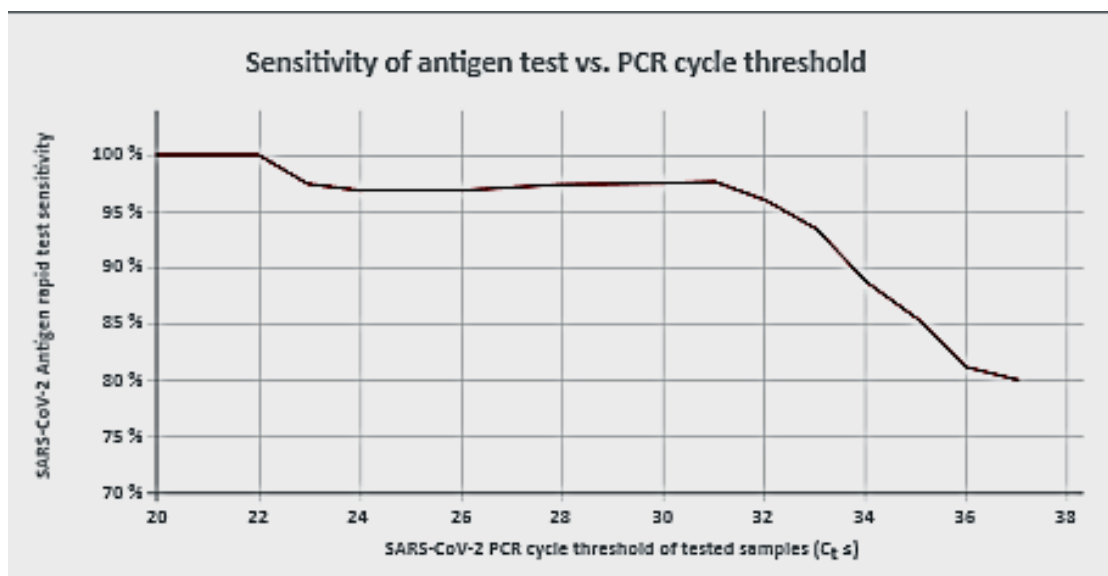

NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test

Rychlý test pro detekci SARS-CoV-2 antigenů virových nukleoproteinů v lidských nasofaryngeálních a oropharyngeálních stěrech.

Produkt	Certifikace	Vzorek	Senzitivita	Specifická	Katalogové číslo	Balení
NADAL® COVID-19 Ag Testovací kazeta	CE	Naso- a oro faryngeální výtěr	97.56 % (C_t rozpětí 20-30)	> 99.9 %	243103N-20	20 testů v balení

Dodávaný materiál: testovací kazety, sterilní tampony, extrakční zkumavky vč. víčka s kapátkem, držák činidla, lahvička s pufrem, příbalový leták.

Cena za balení bez DPH : 4.620,- Kč

Cena za balení s DPH : 5.590 Kč



Objednávky vyřizuje:

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
155 21 Praha 5-Zličín
tel.: 257 220 760
email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
Ing. Ernestová: 777 477 308
Morava – Ing. Žůrová: 777 929 623