

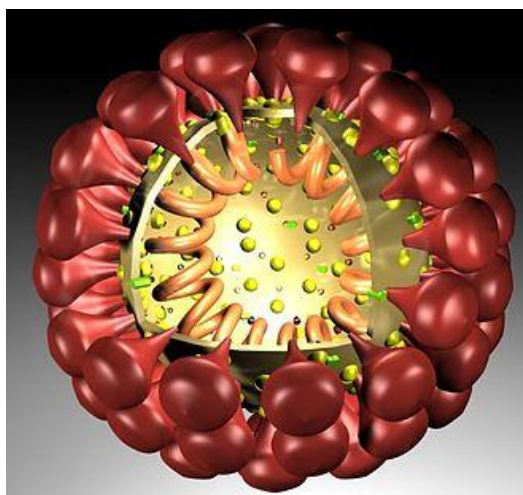
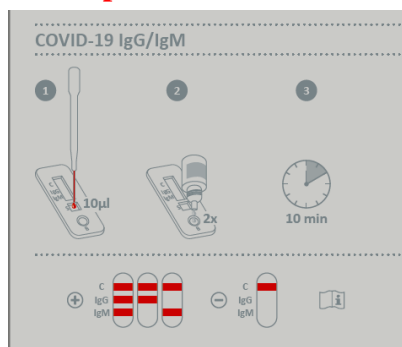
NADAL[®] COVID-19 IgM/IgG test

screeningový test pro rychlou diagnostiku protilátek

Coronaviru (SARS-CoV-2, nebo COVID-19) katalogové číslo 243001N-10

EC Prohlášení o shodě podle Direktivy 98/79/EC, IVD, příloha III

Test nevyžaduje zvláštní školení ani kvalifikaci. Při testování není potřeba přístrojového vybavení. Test je určený pouze pro profesionální použití. Provedení i v ordinaci lékaře. Test není určen pro sebetestování.

**Princip testu**

Test: Kazetový imunochromatografický test s výsledkem do 10 minut. Pro kvalitativní detekci anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM v lidské **plné krvi, séru nebo plasmě** symptomatických pacientů.

Použití: Test je určen k použití jako pomoc při diagnostice primárních a možných sekundárních SARSCoV-2 infekcí.

V raných stádiích infekce (3 až 7 dní) anti-SARS-CoV-2 IgG a IgM mohou být pod detekční limit testu

Charakteristika testu ve srovnání s PCR (*95% interval spolehlivosti)**IgG protilátky**

Diagnostická citlivost: 97,4% (86,2% - 99,9%) *
 Diagnostická specifita: 99,3% (96,2% - 99,9%) *
 Celková shoda: 98,9% (96,1% - 99,9%) *

IgM protilátky

Diagnostická citlivost: 86,8% (71,9% - 95,6%) *
 Diagnostická specifita: 98,6% (95% - 99,8%) *
 Celková shoda: 96,1% (92,2% - 98,4%) *

Zkřížené reakce

Nebyla pozorována zkřížená reakce při testování proti pozitivním vzorkům virusu chřipky typu A, B, RSV, anti-adenovirusu, anti-HBsAg, anti-T.pallidum, anti- H.pylori, anti-HIV a anti-HCV.

Cena včetně 21% DPH: 4.890,-Kč/ balení po 10 ks t.j. 489,- Kč/test

**Objednávky :**

JK-Trading s.r.o., Křivatcová 421/5,
 155 21 Praha 5
 tel.: 257 220 760
 email: praha@jktrading.cz

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604
 Ing. Ernestová: 777 477 308
 Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

www.jktrading.cz