




# NADAL<sup>®</sup> PROM Amniotic Fluid Test

Katalogové číslo: 431006N-01/431006N-03/431006N-10/431006N-20

**Rychlý kvalitativní protilátkový test na detekci plodové vody (IGFBP-1) ve vaginálním sekretu.**

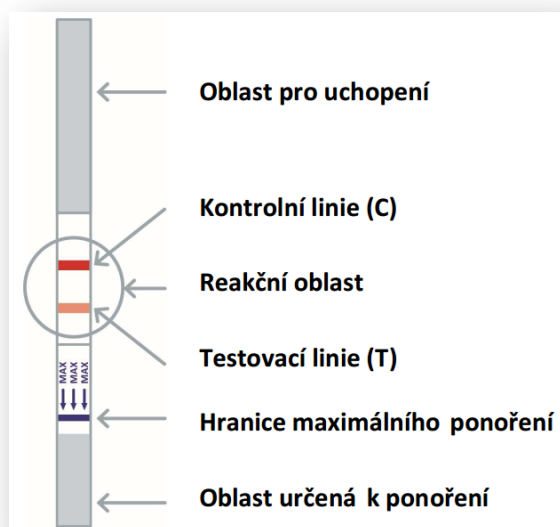

Vysoce citlivá a specifická diagnostika pomocí proužku PROM (Premature Rupture of Fetal Membranes). Jde o proužkový imunochromatický kvalitativní test k detekci plodové vody ve vaginální sekreci. Přítomnost plodové vody se určuje detekcí inzulínu podobného růstového faktoru 1, (insulin-like growth factor binding protein-1) IGFBP-1, jehož koncentrace v plodové vodě je 100–1000× vyšší než v séru matky. Za normálních okolností IGFBP-1 není ve vagíně přítomen, ale po ruptuře plodových obalů se plodová voda s vysokou koncentrací IGFBP-1 mísí s vaginální sekrecí.

## Obsah soupravy

- jednotlivě balené testovací proužky
- sterilní výtěrové tampóny
- zkumavky na vzorek s extrakčním pufrem
- stojan na zkumavky



## Charakteristiky testu

Analytická senzitivita: 5 ng/mL IGFBP-1

Senzitivita: 97,6 %

Specifita: 97,8 %

Odečet výsledku: po 5 minutách

Cena na vyžádání.



## Objednávky vyřizuje:

**JK-Trading s.r.o.**  
Křivatcová 421/5,  
155 21 Praha 5-Zličín  
tel.: 257 220 760  
email: [praha@jktrading.cz](mailto:praha@jktrading.cz)

## Více informací:

Čechy - Ing. Kryl: 777 929 604  
Ing. Ernestová: 777 477 308  
Morava – Ing. Žurová: 777 929 623

Platnost od 1.3.2022